

# Concentrador Estacionario

Oxigenoterapia




**Wellell**

# Concentrador Estacionario

## Concentrador Estacionario de Oxígeno

El concentrador estacionario de flujo continuo de Wellell es idóneo para pacientes que necesitan una oxigenoterapia de alto nivel en su domicilio. Estudios clínicos han documentado que los concentradores de oxígeno son terapéuticamente equivalentes a otros tipos de sistemas de suministro de oxígeno.

Este dispositivo separa el oxígeno del aire ambiente proporcionando una elevada concentración de oxígeno de hasta 95,5% y un flujo de hasta 5 l/ min. A través de una gafa nasal, proporciona al paciente la cantidad de oxígeno deseada.

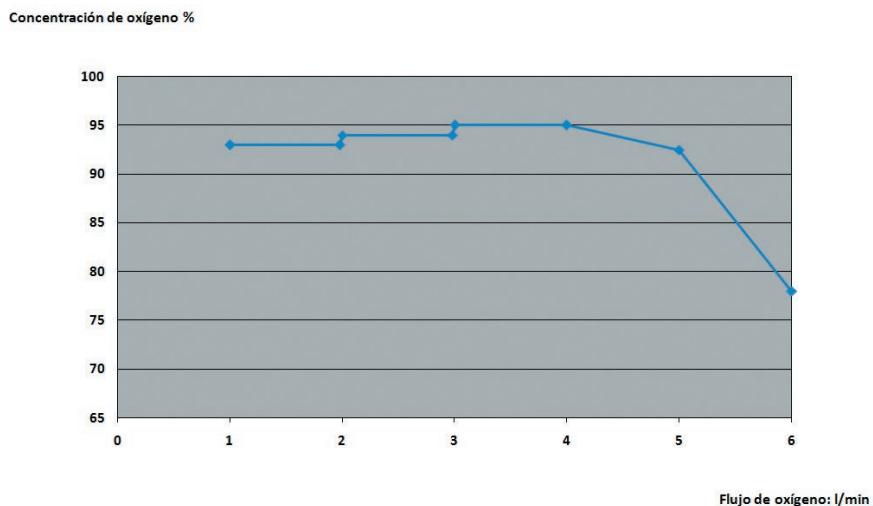

El concentrador de oxígeno continuo de Wellell es compacto con 39 x 24,5 x 50 cm. Incorpora ruedas para poder transportarlo y guardarlo cómodamente.

Cuenta con diversas alarmas que advierten al paciente de diferentes situaciones: fallo eléctrico, sobrecalentamiento del equipo, baja concentración de O2... entre otros. Su temporizador con apagado automático permite ajustar el tiempo de uso. Para una mayor seguridad del paciente, posee una válvula de alivio de presión del compresor.

Para un seguimiento completo de la terapia dispone de una pantalla digital que muestra el tiempo de uso actual y acumulativo.

Se suministra con un filtro de repuesto. Incluye vaso humidificador, cánula y gafa nasal de recambio.

## Elementos destacados:



| Descripción de producto                       | Referencia        | Especificaciones técnicas                           |  |
|---|-------------------|---|--|
| Concentrador Estacionario                     | 0208050N          | Dimensiones (largo x ancho x alto)                  | 39 x 24,5 x 50 cm                                    |
| Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) | 47,5 x 33 x 59 cm | Peso  | 15 kg  |
| Peso total de la caja                         | 17 kg             | Modo de funcionamiento                              | Flujo continuo                                       |
|   |                   | Flujo máx.  | 5L/ min  |
|   |                   | Rango de flujo                                      | 0~5L/min en continuo                                 |
|   |                   | Cambio flujo máx. con presión de aspiración de 7kPa | <0,5L/min  |
|   |                   | Concentración de oxígeno                            | 93% ± 3% y 95,5% ~ 87%                               |
|   |                   | Presión de salida                                   | 20 ~ 50 kPa y 40 ~ 70 kPa                            |
|   |                   | Nivel de sonido                                     | Promedio 48dB parte delantera y 52dB unidad completa |
|   |                   | Tiempo operativo mínimo                             | 30 Minutos   |
|   |                   | Garantía  | Concentrador 2 años                                  |

#### Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6<sup>a</sup> planta  
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain  
T +34 94 4706408  
info@wellell.com



# Wellell